


Moku:Lab

快速入门指南



Moku:Lab

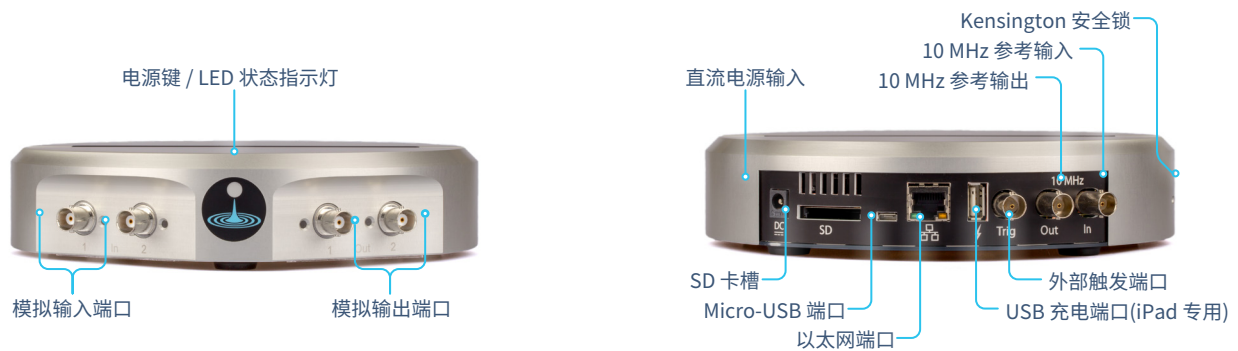

打开/关闭设备

- ① 连接电源至 Moku:Lab 后面板直流电源输入端口。
 - ② 按压电源键并保持2秒钟以上直到 LED 指示灯变成橙色的状态。
 - ③ 等待 LED 指示灯变成蓝/白色切换状态，设备启动完成。
- ④ 要关闭 Moku:Lab，按压电源键并保持2秒钟以上直到 LED 指示灯变成橙色的状态。在拔除电源线之前请等待 LED 橙色指示灯完全熄灭。



设备关闭



设备初始化中
设备关闭中



设备启动完成

安装 Moku 应用程序

iPad 应用程序

- ① 在您的 iPad 上打开应用商店。
- ② 搜索 Moku 应用程序并确保发布者"为"Liquid Instruments"。
- ③ 在您的 iPad 上下载并安装 Moku 应用程序。
- ④ 打开 Moku 应用程序，并且当提示是否允许寻找和连接本地网络内的设备时，授予访问权限以发现并连接到您的 Moku:Lab。

桌面应用程序

- ① 从该位置 [Liquid Instruments Website > Products > Software > Desktop Apps](#) 下载安装程序。
- ② **Windows:** 运行安装程序并按照提示完成应用程序的安装。
Mac: 将图标文件拖拽至您的应用程序文件夹中进行安装。

首次连接至您的 Moku:Lab

当您的 Moku:Lab 启动时，它会进入到出厂默认状态。这意味着它将发射无线接入点信号并启用以太网端口。

选项 1: 无线接入点

在您的 iPad 或者电脑上，选择并加入名为"MokuLab-#####"的 Wi-Fi 网络，这里"#####"是印刷在设备底部的序列号中间的6位数字。默认密码是:"mokuadmin"，均为小写。

选项 2: 以太网

通过以太网线连接您的 Moku:Lab 到一个本地有线连接的网络(如路由器)。确保您的 iPad 或者电脑被接入同一个网络。

选项 3: Micro-USB

(仅限桌面应用程序)
通过 Micro-USB 线缆连接您的 Moku:Lab 到您的电脑。

开始使用 Moku 应用程序

一旦您用 iPad 或者电脑成功连接上 Moku:Lab，您可以开始使用您的 Moku 设备。

- ① 启动您 iPad 或者您电脑上的 Moku 应用程序。
- ② 连接至跟您 iPad 和电脑相同网络内的 Moku:Lab 设备将被显示在"选择您的设备"页面。
- ③ 选择您的 Moku:Lab 并开始使用您的设备。您 Moku:Lab 设备的默认名为"Moku-#####", 这里"#####"是印刷在仪器底部的6位序列号。
- ④ 在"选择仪器"菜单中，选择一个仪器功能来部署在您的 Moku:Lab 上。
- ⑤ 想了解如何使用每一种仪器的功能，可以参考下方的"访问仪器用户手册"部分。

配置您的 Moku:Lab 来加入一个现有的无线网络

一旦您连接上您的 Moku:Lab，您可以让它加入一个现有的无线网络。

- ① 启动 Moku:App。
- ② iPad 应用程序: 在"选择您的设备"屏幕上点击 Moku:Lab 的图标，然后点击屏幕左下角的"配置设备"齿轮图标来配置 Moku:Lab。
- ③ 桌面应用程序: 在"选择您的设备"屏幕上右键单击您的 Moku:Lab 图标。然后选择"配置设备"。切换到 Wi-Fi 标签页，选择"加入一个 Wi-Fi 网络"并输入您想加入的 Wi-Fi 网络名称。如果需要，系统将提示您输入该网络的密码。
- ④ 连接您的 iPad 到相同的 Wi-Fi 网络。iPad 将只搜索同一网络内的 Moku 设备。

访问仪器用户手册

在 iPad 应用程序和桌面应用程序上提供了每一种仪器功能的用户手册。要访问这些用户手册，请部署所需的仪器并按下在屏幕左上方的"主菜单"按钮，然后将鼠标悬停在"帮助"图标上，或者您可以按 F1 键。



Moku:Lab 恢复出厂设置

Moku:Lab 必须接通电源并在开机的时候才能执行恢复出厂设置。您可以使用回形针或者小型尖锐物持续按压仪器底部的"Factory Reset"按键2秒钟以上，将 Moku:Lab 恢复成出厂默认的网络和其他配置设定。当您的 Moku:Lab 重新初始化时，电源按钮上的 LED 指示灯状态将循环显示不同的颜色。Moku:Lab 将在启用以太网端口的同时，以无线接入点模式下重新启动。