


Moku:Delta

快速入门指南



Moku:Delta

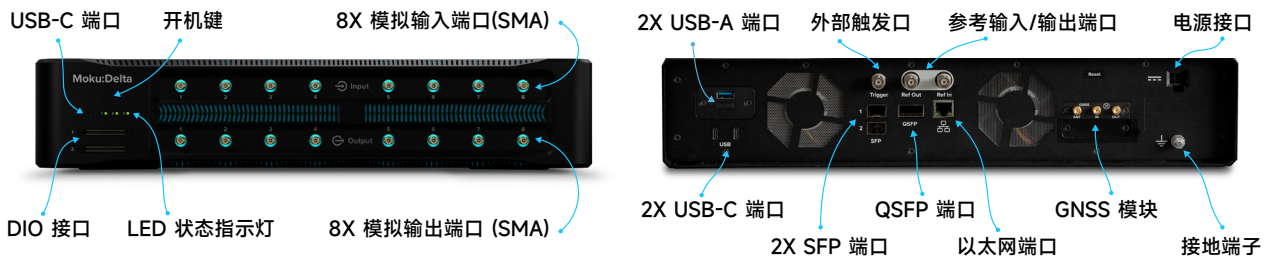

开/关设备

- ① 连接电源线至 Moku:Delta 电源接口。
- ② 保持并按住开机键1秒钟以上，直至前面板 LED 指示灯循环显示蓝色。
- ③ 一旦 LED 指示灯显示任意一种有效设备连接状态时，您即可开始使用设备。
- ④ 要关闭 Moku:Delta，请保持并按住开机键1秒钟以上，直至前面板 LED 指示灯循环显示白色，随后设备将会关机。请等待设备完全关闭后再断开电源线。

安装 Moku 应用程序

桌面应用程序

- ① 通过 [Liquid Instruments Website > Products > Software > Desktop Apps](#) 下载 Moku 应用程序。
- ② **Windows:** 运行安装程序并按照提示完成安装。
Mac: 将图标文件拖拽至您的应用程序文件夹中进行安装。

iPad 应用程序

- ① 在您的 iPad 上打开应用商店。
- ② 搜索 Moku 应用程序并确保发布者为 "Liquid Instruments"。
- ③ 在您的 iPad 上下载并安装 Moku 应用程序。
- ④ 打开 Moku 应用程序，并且当提示是否允许寻找并连接本地网络内设备时，授予访问权限以发现并连接到您的 Moku:Delta。

首次连接至您的 Moku:Delta

选项 1: 以太网

通过以太网线将 Moku:Delta 连接到本地局域网络(例如路由器)。确保您的电脑或者 iPad 被连接到同一个网络。

选项 2: USB (仅限桌面应用程序)

使用 USB 线缆连接电脑与 Moku:Delta 前面板 USB-C 接口。

选项 3: 无线接入点

将 Wi-Fi 适配器插入设备后面板任意一个 USB-A 接口。在您的电脑或 iPad 上，搜索并加入名为 "MokuDelta-#####" 的 Wi-Fi 网络，这里 "#####" 是标注在设备后面板的序列号。网络默认密码标注为 "Password"。

开始使用 Moku 应用程序

一旦您用 iPad 或者电脑成功连接上 Moku:Delta，您可以开始使用您的 Moku 设备。

- ① 启动 Moku 应用程序。
- ② 凡与电脑和 iPad 连接至同一网络的 Moku:Delta 设备，均会显示在"选择您的设备"页面。
- ③ 选择您的 Moku:Delta 并开始使用您的设备。Moku:Delta 设备的默认名为 "Moku-#####"，这里 "#####" 是标注在设备后面板的6位序列号。
- ④ 在"选择仪器"菜单中，选择一个仪器功能部署到您的 Moku:Delta 上。
- ⑤ 如想了解如何使用每一种仪器功能，可以参考下方的"访问仪器用户手册"部分。

仪器用户手册

Moku 仪器用户手册有助于您掌握仪器的功能与特性。您可以通过点击屏幕左上角的主菜单按钮并将鼠标悬停在"帮助"图标上来访问这些用户手册。同时这些用户手册也可以在官网上查询：[Liquid Instruments Website > Products > Product Documentation](#)。



LED 指示灯

LED	设备状态	LED	指示颜色	设备状态
所有 LED 循环显示蓝色	 设备启动中	LED 1 网络连接		以太网络连接成功 Wi-Fi 网络启用
所有 LED 循环显示白色	 设备关机中			以太网络连接成功 Wi-Fi 网络禁用
所有 LED 循环显示橙色	 固件升级中			以太网络断开连接 Wi-Fi 网络启用
所有 LED 闪烁显示橙色	 恢复模式			以太网络断开连接 Wi-Fi 网络禁用
所有 LED 循环显示红色	 恢复出厂设置	LED 2 时钟		外部参考接入 GPS 开启
				外部参考接入 GPS 关闭
				外部参考断开 GPS 开启
		LED 3 SFP / QSFP		SFP 或 QSFP 连接成功

如有疑问

您可以在 [Liquid Instruments Knowledge Base](#) 检索我们的在线技术支持资源，您可以在这里查找适用于所有 Moku 设备和软件的设置指南、仪器配置说明、故障排查说明和功能文档。

如需进一步支持，请联系：support@liquidinstruments.com。